


e-Acu-plus

ELECTRIC ACUPUNCTURE PEN



Használati utasítás

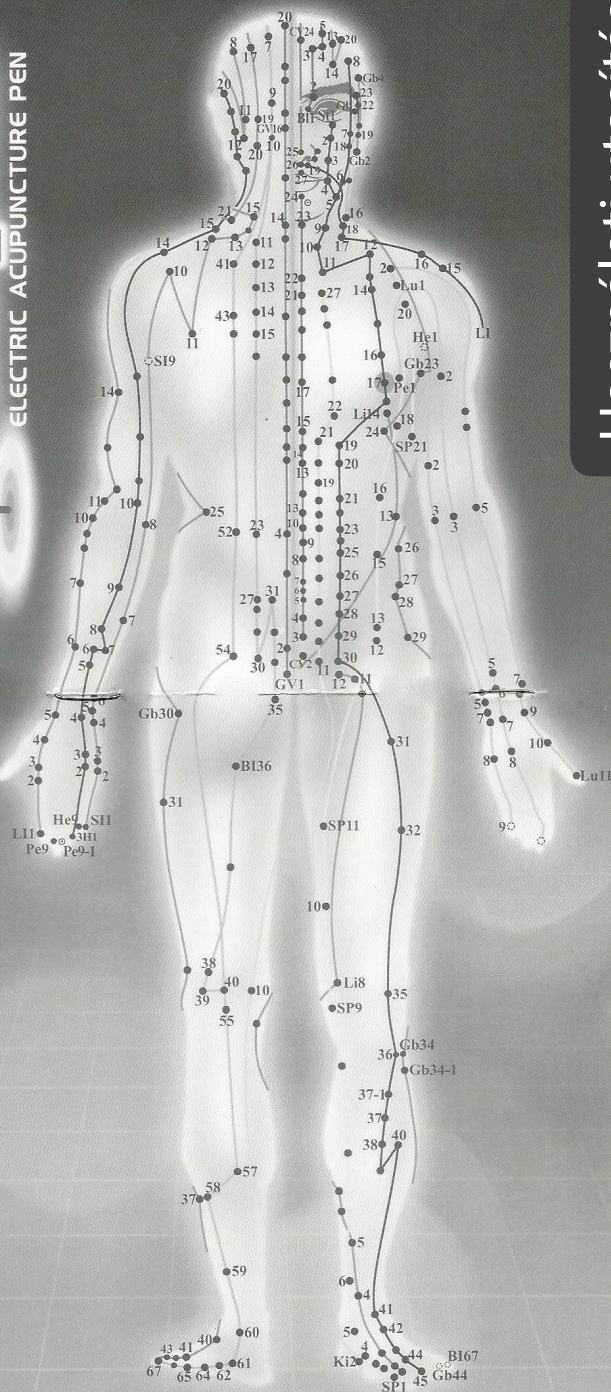

CE

MADE IN CHINA

Gratulálunk, hogy megvásárolta **e-ACU-Plus** készülékét!

Az elektroakupunktúrás stimuláció a hagyományos kínai orvoslás (TCM) ősi, akupunktúrás tudásán alapul, új csomagolásban.

Olyan készüléket vásárolt, melyet egyszerű, otthoni használatra terveztek. A legjobb eredmény elérése és az e-ACU-Plus hosszabb élettartamának érdekében kérjük, olvassa el figyelmesen a használati utasításokat. A használati utasítás tartalmazza a test akupunktúrás pontjait bemutató akupunktúrás ábrákat.

Mi is az akupunktúrás készülék?

(Egyszerűsített leírás)

Az akupunktúra a világ legősibb terápiás módszerei közé tartozik, továbbá a hagyományos kínai orvoslás (TCM) része - a kínai orvoslás, a kínai táplálkozástudomány (az öt elemnek megfelelő táplálkozás), Qi Gong (Chi Gong — terápiás gyakorlat) és Tuina (masszázs) mellett.

Az ázsiaiak empirikus tudása az emberi test funkcióiról és kezeléséről több mint 5000 évre nyúlik vissza, és még napjainkban is időszerű. A hagyományos kínai orvoslás (TCM) az emberi test energia egyensúlyára összpontosít. Egyszerűen megfogalmazva, az egészséges testben a „Qi” (vagy Chi, életenergia) harmonikusan pulzál az utak hálózatán (meridiánok) keresztül. Az összhang hiánya gátolja az energia egyensúly kialakulását, és kezelés nélkül fájdalomhoz vagy betegséghez vezet. Az energia áramlás vagy egyensúly zavara, a többi módszer mellett, külsőleg kezelhető akupunktúrás készülékkel.

Az energia utak mellett minden emberben 361 pontosan meghatározott akupunktúrás pont található, melyek mindegyike egy adott szervhez kapcsolódik. Ezek az akupunktúrás pontok közvetlenül a bőr alatt helyezkednek el, és hozzáférést biztosítanak a test mélyebb energiarendszeréhez.

Gyakorlatilag, minden tünet kezelhető, a megfelelő egy vagy több akupunktúrás pontot stimulálva, melyet hagyományosan tűkkel végeztek. Azonban a tűk alkalmazásának hátránya, hogy az érzékenyebb páciensek fájdalmasnak találták a kezelést.

Ez az e-ACU-Plus lényege - mivel:


Az e-ACU-Plus kettős célú készülék, személyes, otthoni használatra, mely akusztikus jel segítségével azonosítja az akupunktúrás pontokat, valamint elektromos árammal stimulálja azokat.

Az e-ACU-Plus méri a bőr elektromos ellenállását, így pontosan meghatározza az emberi test akupunktúrás pontjait. Az akupunktúrás pontok helyének közelítő meghatározásához használja az útmutatóban található ábrákat; majd vizsgálja meg ezeket a pontokat az e-ACU-Plus készülékkel, mely hangjelzéssel jelzi a pontok pontos helyét. Ez a technológia még a laikus emberek számára is lehetővé teszi az adott pont meghatározását.

Az e-ACU-Plus készülék másik funkciója, hogy alacsony intenzitású elektromos áramot bocsát ki, így stimulálva az akupunktúrás pontokat, melynek segítségével különösen egyszerűvé, tisztává, fájdalommentessé és kényelmessé válik a kezelés, különösen az érzékenyebb személyek számára.

Az adott akupunktúrás pont stimulálásának időtartama és intenzitása egyénenként beállítható. A stimuláció időtartama egyénenként kiválasztható vagy beállítható 30-60 másodpercig. A 6 intenzitási szint lehetővé teszi a felhasználó számára a kívánt beállítást kiválasztását. A bőr vastagságától függően, a felhasználó enyhe csípést érezhet - a test blokkolt energiái egyensúlyba kerülnek.

A készülék szerkezetének bemutatása:

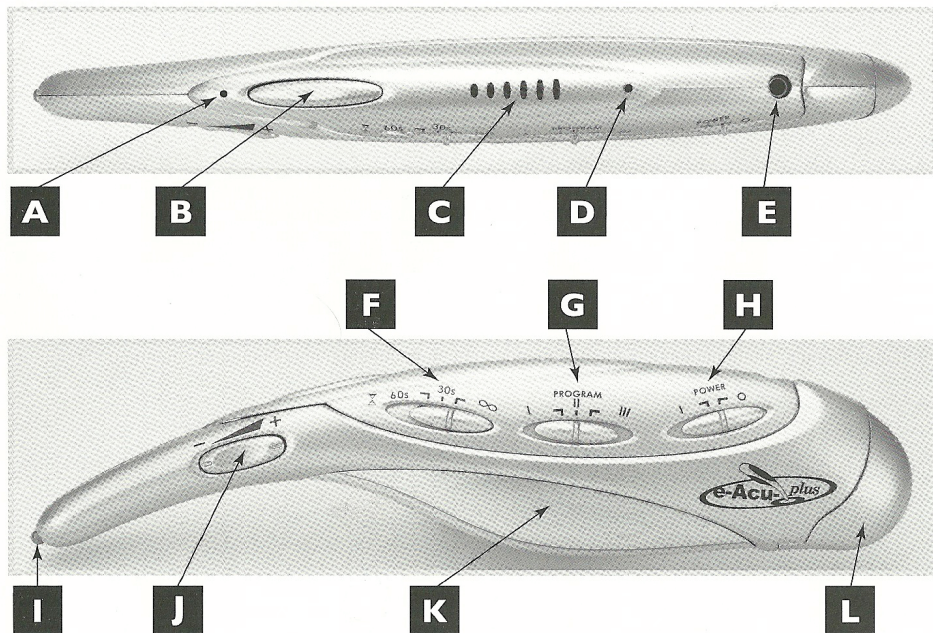

A: Zöld led kijelző

B: Start gomb

C: LED sor

D: Alacsony feszültség jelző

E: Fülhallgató dugó

F: Időzítő beállító kapcsoló

G: Program kapcsoló

H: Főkapcsoló

I: Réz fej

J: Intenzitás beállító gomb


K: Fém érintkező felület

L: Elemtartó

2 x CR2025 elem




Fülhallgató

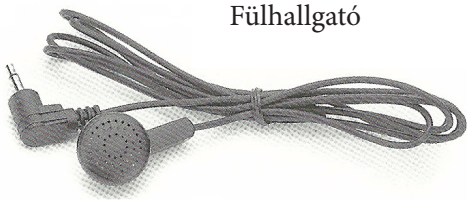

Elemek behelyezése:

1. Nyissa ki az elemtartó fedelét (L).
2. Helyezze be a 2 db 3 voltos CR2025 elemet az elemtartóba (L), az elemtartóban látható utasításnak megfelelően. Ellenőrizze a megfelelő polaritást! Úgy helyezze be mindkét elemet, hogy + oldaluk a vezérlőgombokkal szemben legyen.
3. Csukja be az elemtartót (L) az eredeti helyzetnek megfelelően, amíg kattánó hangot hall.

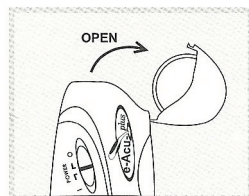

Működés:

A készülék áram alá helyezése

- A készülék bekapcsolásához csúsztassa a főkapcsolót (H) „0”-ról „1” állásba, majd kapcsoljon standby (készenléti) helyzetbe. (1. ábra)
- A jelzőhang megszólal. (A hangerő szintje alacsony, mások megzavarásának elkerülése érdekében); Csatlakoztassa a fülhallgatót (E) a jobb hangészleléshez; (2. ábra)
- A kezelés megkezdése előtt állítsa be a programot, az időzítőt és az intenzitás szintjét.

Program beállítása

A gombbal (G) három programot lehet beállítani. Állítsa be a program kapcsolót, az alábbi programokhoz tartozó, különböző hullámok kiválasztásához. (3. ábra)

- I. program (váltakozó hullám): a vérkeringést támogatja;
- II. program (szakaszos hullám): segíti az izmok és idegek stimulálását;
- III. program (folyamatos hullám): segíti a fájdalom csillapítását.

Időzítő beállítása

Az időzítő beállító kapcsoló (F) segítségével válassza ki az akupunktúrás stimuláció idejét, az alábbiak szerint. (4. ábra)

- 30s: 30 másodperces kezeléshez;
- 60s: 60 másodperces kezeléshez;
- ∞ határozatlan idejű kezeléshez.

Intenzitás beállítása

6 stimuláció-intenzitási szint van, mely a LED soron (C) balról (minimális szint) jobbra (maximális szint) látható. (5. ábra)

- Nyomja meg a gombot az intenzitás 6. szintre növeléséhez (6. ábra).
- Nyomja meg a gombot az intenzitás 1. szintre csökkentéséhez. (6. ábra)


Megjegyzés: Mindig a legalacsonyabb beállítással kezdje a kezelést. Az akupunktúrás stimuláció intenzitásának szintje a kezelés alatt bármikor módosítható.

Hogyan azonosítsuk az akupunktúrás pontot?


- Tartsa úgy az e-Acu-Plus készüléket, mint egy tollat, és érintse meg a fémes felületet (K), megteremtve a jó érintkezést;
- Mozgassa a rézfejet a bőrön enyhe nyomást gyakorolva. A bőr legyen tiszta (nem olajos), száraz és sérülésektől mentes; (7. ábra)
- A jelzőhang felerősödik az akupunktúrás ponthoz közeledve. (Az egyes akupunktúrás pontok körülbelüli elhelyezkedéséhez kérjük, tanulmányozza az emberi test akupunktúrás térképét.)

Kezelés megkezdése

- Nyomja meg a start gombot (B) a kezelés megkezdéséhez. Ez tűszúrásra emlékeztető érzést vált ki - az intenzitás szintjétől függően; (8. ábra). Megjegyzés: Ha Ön a határozatlan idejű kezelés beállítást alkalmazza, a start gombot nyomva kell tartania a stimuláció alatt.
- A zöld LED jelzőfény (A) világít a stimuláció alkalmazásakor; (8. ábra)

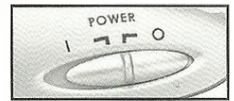


1.

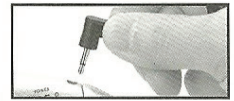


2.




3.

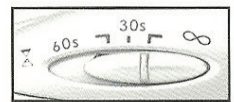

4.

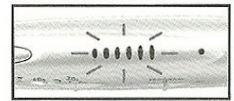


5.

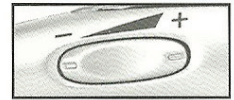


6.



7.

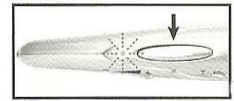

8.

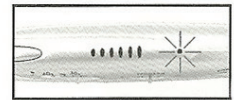

9.

- Amikor az akupunktúrás stimuláció befejeződik, a zöld LED (A) kialszik, és a jelzőhang ismét megszólal. Megismételheti a fenti lépéseket egy újabb kezeléshez;
- Ha az elemek töltöttsége alacsony, az alacsony töltés jelző (D) bekapcsol; (9. ábra)
- A kezelés befejezésekor: Fordítsa a főkapcsolót (H) az „I” állásból „0” állásba a készülék kikapcsolásához.

HASZNÁLAT UTÁN MINDIG KAPCSOLJA KI AZ ÁRAMELLÁTÁST. AZ ELEMEEK GYORSAN LEMERÜLNEK, HA A KÉSZÜLÉKET BEKAPCSOLT ÁLLAPOTBAN HAGYJA.

MEGJEGYZÉSEK:

- Az e-ACU-Plus alkalmazása nem minősül orvosi kezelésnek, ezért eredménye nem garantált.
- Az e-ACU-Plus NEM orvosi eszköz!
- Nem alkalmazható diagnosztikára, terápiára vagy megelőzésre!
- Terhesség esetén, pacemaker vagy sugárterápia alkalmazása után javasoljuk, hogy a készüléket kizárólag az orvossal vagy a terapeutával történő konzultáció után használja.
- Kérjük, hogy bármely testi vagy fiziológiai panasz vagy kétség esetén forduljon családorvosához!
- Az akupunktúrás pontok stimulációs ideje függ a kezelendő terület állapotától. Általában javasoljuk, hogy minden akupunktúrás pontot legalább naponta kétszer vagy háromszor, körülbelül 30 másodpercig stimuláljon. A kezdeti hatás általában öt vagy tíz használat után érezhető. Krónikus esetben az alkalmazást hosszabb ideig, hetente kétszer vagy háromszor meg kell ismételni. Az állapot javulása esetén, az alkalmazások gyakoriságát fokozatosan csökkenteni kell, illetve esetleg abba is lehet hagyni.
- Különböző mértékű tűszúrásra emlékeztető érzés lép fel, ami függ a választott intenzitástól.
- Használhatja az eszközt önmagán, vagy egy másik személyen. De ha másik személyen kívánja alkalmazni (például gyereken), a kezelés teljes ideje alatt érintkeznie kell ezzel a személlyel (pl. helyezze tenyerét a vállára). Ez elengedhetetlen az alacsony intenzitású elektromos áram átvitelére saját testéről a másik testre.
- Az akupunktúra alkalmazása hatékonyabb, ha kirekeszti a stresszt, és a kezelés idejére kizárja a mindennapi gondokat. Nem zavarhatja meg telefonhívás vagy TV adás a szobában, ahol az eszközt használja, és győződjön meg arról is, hogy a szoba hőmérsékletét kényelmes szintre állítsa.
- Az egészségügyi állapotok alábbi listája csak példákat tartalmaz, és a WHO akupunktúrás alkalmazásokra vonatkozó ajánlásán alapul. További információkért kérjük, forduljon akupunktúrás terapeutájához. További irodalom megtalálható az erre szakosodott könyvtárakban (például www.amazon.com)

Elemekre vonatkozó információk:

- A készülék 2 x CR2025 lítium elemmel működik. Kizárólag a megadott típusú elemek használhatók. Ne változtassa meg az elemek típusát! Ne használjon újratölthető elemeket!
- Gondosan olvassa el az utasításokat és pontosan helyezze be az elemeket, a polaritás betartásával, a szivárgás elkerülése érdekében.
- Ne próbálja meg újratölteni a nem újratölthető elemeket.
- Ne használjon higany-elemeket!
- Mindig egyszerre cserélje ki az elemeket! Ne keverje a régi és az új elemeket!
- Ne iktassa ki az elemek érintkezőit.
- A szivárgás elkerülése érdekében távolítsa el a lemerült elemeket.
- Ha hosszabb ideig nem kívánja használni a készüléket, vegye ki az elemeket.
- Az elemek elégetése tilos!
- Ne merítse vízbe az elektromos készüléket. A készülék kizárólag törléssel tisztítható.

Az e-ACU-Plus tisztítása:

- A tisztításhoz kapcsolja ki a készüléket.
- Alkalmanként tisztítsa meg a készülék felületét nedves ronggyal.

FIGYELMEZTETÉS:

Ne merítse vízbe a készüléket és ne használja e-ACU-Plus készülékét nyirkos helyiségben. Gyermkektől elzárva tartandó!

Az emberi test AKUPUNKTÚRÁS TÉRKÉPE:

12 meridián (nyomvonal) és 2 extra meridián létezik:

(Az angol rövidítést zárójelben tüntettük fel.)

- | | | |
|-------------------------------------|------------------------------------|------------------------------|
| (1) Tüdő Meridián (Lu) | (6) Vékonybél meridián (SI) | (11) Epehólyag meridián (Gb) |
| (2) Vastagbél meridián (LI) | (7) Húgyhólyag meridián (BI) | (12) Máj meridián (LI) |
| (3) Gyomor meridián (St) | (8) Vese meridián (Ki) | (13) Kormányzó meridián (GV) |
| (4) Lép hasnyálmirigy meridián (Sp) | (9) Szívurok meridián (Pc) | (14) Befogadó meridián (CV) |
| (5) Szív meridián (He) | (10) Hármás melegítő meridián (3H) | |

Hagyományos akupunktúrás alkalmazások:

(Az Egészségügyi Világszervezet [WHO], Genf, ajánlásának kivonata)

- | | | |
|-------------------------------------|----------------------------|---------------|
| • Influenzaszerű fertőzések | • Izom és ízületi fájdalom | • Hasmenés |
| • Általános felső légúti fertőzések | • Tenisz könyök | • Székrekedés |
| • Migrén | • Álmatlanság | • Fejfájás |
| • Menstruációs problémák | • Fogfájás, stb. | |

Jótállási jegy

A 151/2003. (IX.22.) Kormány rendelet előírásai alapján cégünk az egyes fogyasztási cikkek kötelező jótállásáról szóló rendeletnek megfelelően a vásárlás napjától számított alább megjelölt jótállást és 24 hónapra szavatosságot vállal. A vásárlás napján a Forgalmazó és a Vásárló között Fogyasztási szerződés keletkezik. A jótállási jogokat a fogyasztási cikk tulajdonosa érvényesítheti. A jótállás a fogyasztó a törvényből eredő jogait nem érinti. A szerződés szempontjából a fogyasztó a gazdasági, vagy szakmai tevékenység körén kívül eső célból a forgalmazóval szerződést kötő személy. A jótállási idő elteltével a vásárlónak kell bizonyítania a hiba gyári eredetét. A reklamáció esetén a kereskedelmi egységben vagy a forgalmazónál jegyzőkönyvet kell felvenni a hibáról ill. a vásárló igényéről. A hiba elhárításának módjai: a./javítás, b./ csere, c./ áruszállítás, d./vételár visszafizetés, ebben a sorrendben. Javítás esetén törekedni kell arra, hogy a termék javítása legfeljebb 15 napon belül befejeződjék és az a fogyasztónak jelentősebb kényelmetlenséget ne okozzon. Szennyeződéstől megtisztított terméket szabad javításra átadni. A jótállás keretébe tartozó javítás esetén a forgalmazó, ill. a javító szolgálat a jótállási jegyen köteles feltüntetni a javítási igény bejelentésének és a javításra átvétel időpontját, a hiba okát a javítás módját, a megjavított termék fogyasztó részére történő visszaadásának időpontját, a jótállás a javítás időtartamával meghosszabbított új határidejét. A jótállást kizáró feltételek változatlanul érvényesek. A a szavatossággal kapcsolatos jogokat a 49/2003.(VII.30.) GKM rendelet szabályozza újra. Nem vonatkozik a jótállás a nem rendeltetészerű használatból, valamint a külső fizikai behatásokból eredő meghibásodásokra.

Forgalmazó és szerviz: REXTRA KFT. 2000. Szentendre Rózsa u. 16.

Tel.: 06 (26) 309-109

Jótállás ideje:


hó

Gyári szám:


A vásárlás időpontja:

Aláírás, bélyegző:


1. Influenzaszerű
fertőzések:

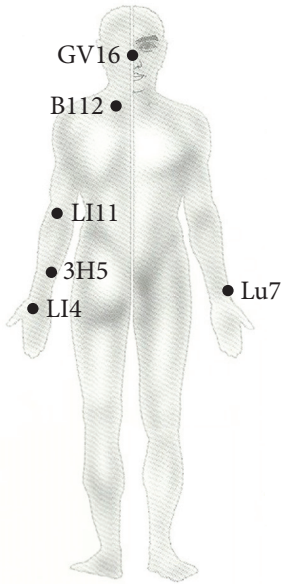


2. Meghűlés, nátha:

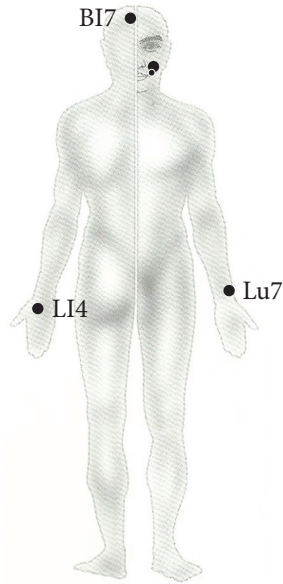


3.A.: Fej-, ill.
nyakszirt fájdalom:

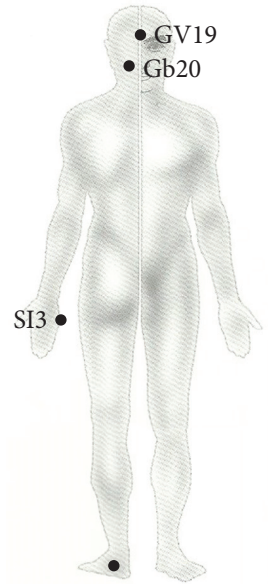


3.B.: Fejfájás,
halánték:

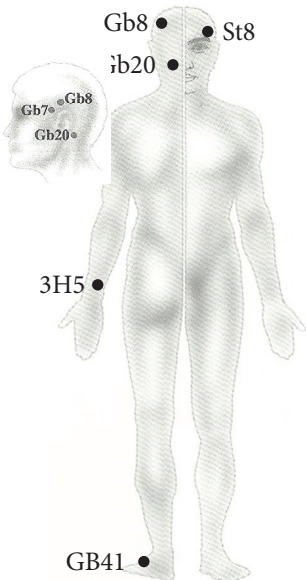


4.A.: Izom és ízületi
fájdalom, térd:

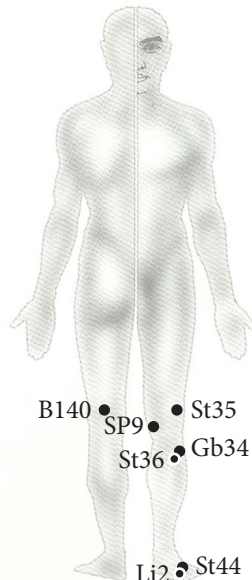


4.B.: Izom és ízületi
fájdalom, hát:

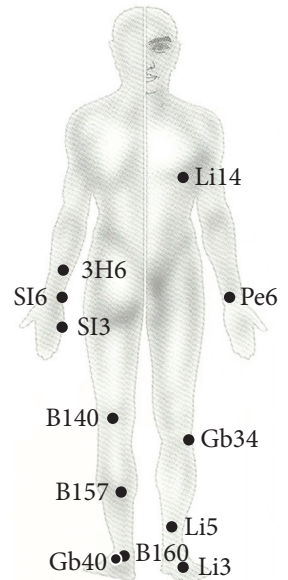


4.C.: Izom és ízületi
fájdalom, könyök:

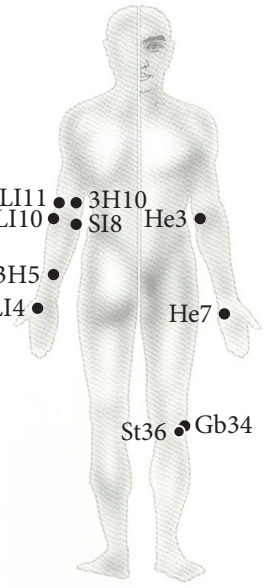


5.: Csuklás:

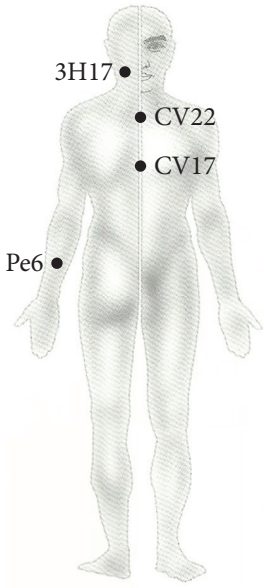


6.: Menstruációs
problémák:

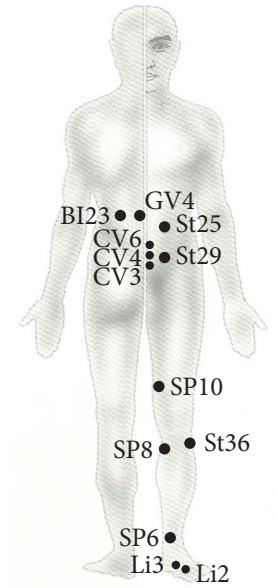

7.: Hasmenés:

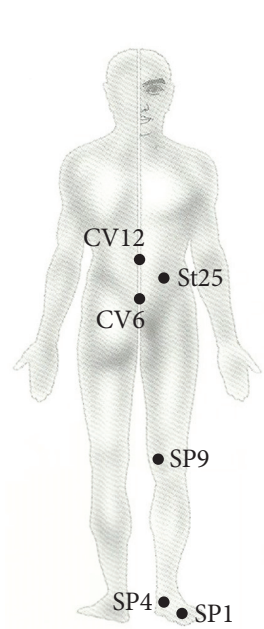

8.: Székrekedés:

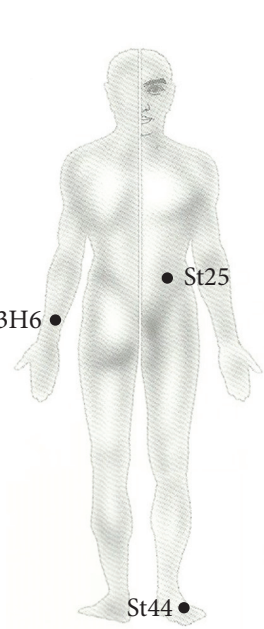

9. Fogfájás:

