

RM_LB_WE300_EN_ver1342
INOWE3000000000XXXXX

Használati útmutató
Model: WE300
www.qutie-rossmax.com
Hibaüzenet
Lo

Alacsony töltés:
Kérjük, azonnal cseréljen
elemet.

E r r

Túlterhelés:
A baba súlya meghaladja a
20 kg-ot.

Műszaki adatok

1. Maximális terhelhetőség: 20 kg
2. Minimális terhelés: 100 g
3. Beosztás: 5 g
4. Áramforrás: 1x3V (CR2032) elem
5. Üzemeltetési környezet: 0°C- 40; < 80% RH

*Műszaki változások lehetségesek.

Garancia
Jótállási jegy

A 151/2003. (IX.22.) Kormányrendelet előírásai alapján cégünk az egyes fogyasztási cikkek kötelező jótállásáról szóló rendeletnek megfelelően a vásárlás napjától számított alább megjelölt jótállást és 24 hónapra szavatosságot vállal. A vásárlás napján a Forgalmazó és a Vásárló között Fogyasztási szerződés keletkezik. A jótállási jogokat a fogyasztási cikk tulajdonosa érvényesítheti. A jótállás a fogyasztó a törvényből eredő jogait nem érinti. A szerződés szempontjából a fogyasztó a gazdasági, vagy szakmai tevékenység körén kívül eső célból a forgalmazóval szerződést kötő személy. A jótállási idő elteltével a vásárlónak kell bizonyítania a hiba gyári eredetét. A reklamáció esetén a kereskedelmi egységben vagy a forgalmazónál jegyzőkönyvet kell felvenni a hibáról ill. a vásárló igényéről. A hiba elhárításának módjai: a./ javítás, b./ csere, c./ árszállítás, d./ vételár visszafizetés, ebben a sorrendben. Javítás esetén törekedni kell arra, hogy a termék javítása legfeljebb 15 napon belül befejeződjék és az a fogyasztónak jelentősebb kényelmetlenséget ne okozzon. Szennyeződéstől megtisztított terméket szabad javításra átadni. A jótállás keretébe tartozó javítás esetén a forgalmazó, ill. a javító szolgálat a jótállási jegyen köteles feltüntetni a javítási igény bejelentésének és a javításra átvétel időpontját, a hiba okát a javítás módját, a megjavított termék fogyasztó részére történő visszaadásának időpontját, a jótállás a javítás időtartamával meghosszabbított új határidejét. A jótállást kizáró feltételek változatlanul érvényesek. A a szavatossággal kapcsolatos jogokat a 49/2003.(VII.30.) GKM rendelet szabályozza újra. Nem vonatkozik a jótállás a nem rendeltetésszerű használatból, valamint a külső fizikai behatásokból eredő meghibásodásokra.

Forgalmazó és szerviz: REXTRA KFT. 2000. Szentendre Rózsa u. 16.
Tel.: 0626-309-109

Jótállás ideje: hó

Gyári szám:

A vásárlás időpontja:

Aláírás, bélyegző:


Bevezetés

Köszönjük, hogy a Rossmax babamérleg vásárlása mellett döntött. Kérjük, az első használat előtt tanulmányozza ezt a használati utasítást, és gondosan őrizze meg, hogy szükség esetén kéznél legyen.

Biztonsági irányelvek

- Mindig alaposan olvassa el a biztonsági utasításokat.
- A mérleg használatakor kövesse az alapvető biztonsági óvintézkedéseket minden elektromos alkatrésznel.
- Őrizze meg ezt a használati utasítást későbbi használatra.
- A készülék nem vízhatlan. Ne tegye ki a terméket esőnek, nedvességnek.
- Üzembe helyezés előtt helyezze a készüléket biztonságos, lapos felületre. Ha az alábbiak közül bármelyik helyzetet tapasztalja, ellenőriztesse a készüléket szerelővel.
 - A készüléket nedvesség érte.
 - A készülék leejtés következtében megsérült.
 - A készüléken törés jelei mutatkoznak.
 - Ne helyezze az alapegységet nedves helyiségbe, vízforrás 1,5 m-es körzetébe.
- Ne szerelje szét a mérleget. Ez a mérleg nem tartalmaz olyan alkatrészt, melyet a felhasználó javíthatna.
- A mérleget csak rendeltetés szerűen használja.
- A mérleget enyhén benedvesített ronggyal vagy antisztatikus kendővel tisztítsa. Soha ne használjon tisztítószert vagy dörzsölő oldószert.

Az egyes részek neve, funkciója

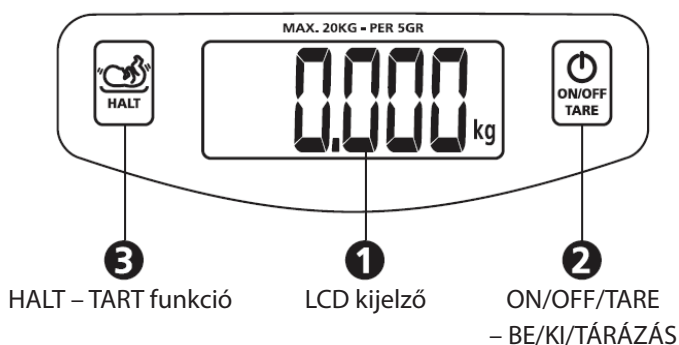

Az elem behelyezése

1. Nyomja le és emelje ki az elemtartó fedelét az elemtartó felnyitásához.
2. Helyezzen be vagy cserélje ki az egy darab „CR2032” elemet az elemtartóban, a benne jelzett utasítás szerint.
3. Helyezze vissza az elemtartó fedelét, először az alján lévő horgok bekattintásával, majd a fedél felső szélének benyomásával.
4. Ha a készüléket hosszabb ideig nem használja, távolítsa el az elemet.

Az elemet cserélnie kell, ha:



1. az alacsony töltés ikon feltűnik a kijelzőn,
2. az ON/OFF/TARE gombot lenyomta, de semmi nem jelenik meg a kijelzőn.

Figyelmeztetés

1. Az elem veszélyes hulladék. Ne dobja ki együtt a háztartási hulladékkal.
2. A készülékben nincsenek a felhasználó által javítható alkatrészek. A garancia nem terjed ki az elemre vagy a fáradt elem okozta megrongálódásra.
3. Kizárólag vadonatúj elemet használjon. A régit mindig új elemre cserélje.

A mérés menete

1. A bekapcsoláshoz nyomja le az ON/OFF/TARE gombot, a mérleg kijelzőjén 2 mp múlva nullák jelennek meg: „0.000”.
2. Finoman és óvatosan helyezze el a babát a mérőfelületen.
3. A mérés alatt a „HOLD” szó villog a kijelzőn, és a villogást a mérés befejezésekor fejezi be.

Automata TART funkció

1. Ez a mérleg TART (HOLD) funkcióval rendelkezik a mocorgó babák súlyának méréséhez.
2. Az automata TART funkció képes a baba súlyának megjelenítésére a kijelzőn, amint kellően mozdulatlan a pontos mérési eredmény elnyeréséhez.
3. Amint a baba súlya megjelenik a kijelzőn, a „HOLD” szó villogása megszűnik, és a mért súly értéke jelenik meg 20 mp-en át.
4. A mérleg automatikusan kikapcsol.

Kézi TART funkció

1. Ha a baba erőteljesen rúgkapál, mozog, súlya nem mérhető meg.
2. Nyomja meg a „HALT” gombot, a villogó „HOLD” szó 3 mp-en belül eltűnik, és a mért súly jelenik meg 20 mp-en át.

Tárázó funkció

1. Ha Ön törölközőt helyez a baba alá, azt a bekapcsolás előtt kell a mérőfelületre helyezni.
2. Ha erről megfeledkezett, nyomja meg az „ON/OFF/TARE” gombot, hogy a törölköző súlyát ezzel törölje, miután azt a felületre helyezte.
3. Amikor megnyomja az „ON/OFF/TARE” gombot, a „TARE” szó jelenik meg a kijelzőn. (Megjegyzés: Ha az „ON/OFF/TARE” gomb megnyomása után eltávolítja a törölközőt, a mérleg negatív értéket jelenít meg.)
4. A mérleg nulla „0.000” helyzetbe visszaállításához nyomja meg az „ON/OFF/TARE” gombot, miután a „HOLD” szó villogása megszűnt.

Váltás kg/lb/oz mértékegységek között

Ha szükséges, a mértékegység kiválasztásához „kg”, „lb” és „oz” közül kapcsolja át a mértékegység kapcsolót a mérleg alján.